

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПАРИВАНИЯ СЕРИИ AUTO EVA 60 В ТОКЕ АЗОТА



Автоматизированные системы параллельного упаривания серии Auto EVA от Компании RayKol - это безопасные, высокопроизводительные, высокоскоростные системы с низким расходом азота. Равномерный нагрев и уникальная технология отслеживания уровня жидкости, обеспечивают точное параллельное концентрирование проб. Пользователи могут отслеживать весь процесс упаривания в режиме реального времени, с помощью планшета или смартфона.

Особенности


Использование генераторов избавит вас от проблем, связанных с заменой и эксплуатацией газовых баллонов высокого давления. Надежно обеспечит вашу лабораторию азотом гарантированной чистоты.

■ Широкий спектр применения

Система используется в пробоподготовке для определения содержания остаточных пестицидов, ветеринарных препаратов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды, а так же в биохимических, фармацевтических исследованиях и др.

■ Высокая производительность

- Одновременное упаривание до 80-ти образцов.
- Глубина погружения иглы для продувки изменяется автоматически по мере упаривания растворителя

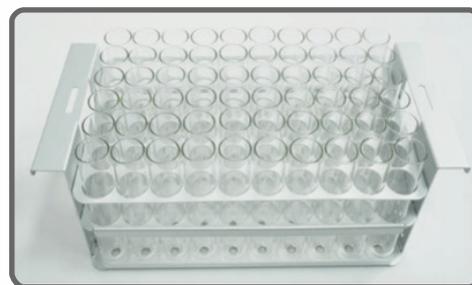

Особенности

■ Высокая степень автоматизации, возможность работы без участия оператора

Создание и сохранение метода, автоматический запуск выбранного метода без участия оператора. Возможность наблюдения за процессом с помощью смартфона или планшета.

■ Универсальность

- Положение игл регулируется, в зависимости от объема пробы.
- Штативы для емкостей с образцами легко заменяются. Доступны различные опции для реализации требований методик и пожеланий пользователей.
- Совместимость с другими системами пробоподготовки RayRol

Безопасность

- Встроенная вытяжка для предотвращения попадания паров в помещение лаборатории.
- Модули продувки азотом и нагрева (водяная баня) полностью изолированы друг от друга для обеспечения безопасности оператора.
- Система отслеживает соблюдение заданных параметров и при их нарушении (недостаточное давление газа, недостаточный уровень воды в водяной бане) сигнализирует о нарушениях и отключает систему.



Генераторы азота серии EVA iG на 100% совместимы с упаривателями серии Auto EVA.

Области применения



📍 Москва
📍 Екатеринбург
📍 Новосибирск

+7 (800) 250-34-64
www.element-msc.ru
info@element-msc.ru

